


## 如何检查和更换开启式管式炉 OTF-1200 的加热元件

1. 如图 1 所示打开管式炉：




2. 拧开上盖的十个内六角螺丝（红色标号 1-10）然后拆下上下两盖（黄色标号 1-2）

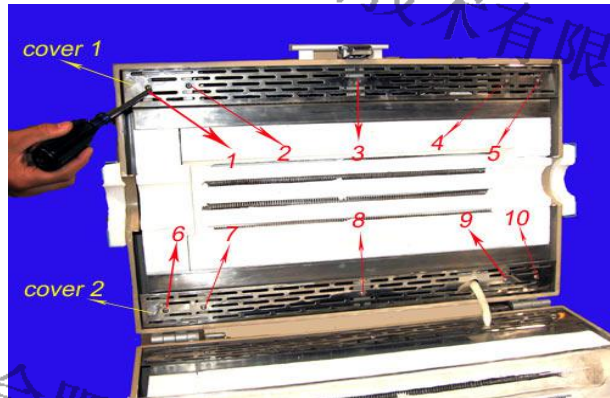


3. 如图 3，分别松开上下两个螺母（如图数字 1 表示），然后拆下电源线（如图数字 2 表示），拆下电源线但是保持电阻丝连通（如图 3 表示）。

**注意：**当拆下电源线时，请确认电源已关闭。

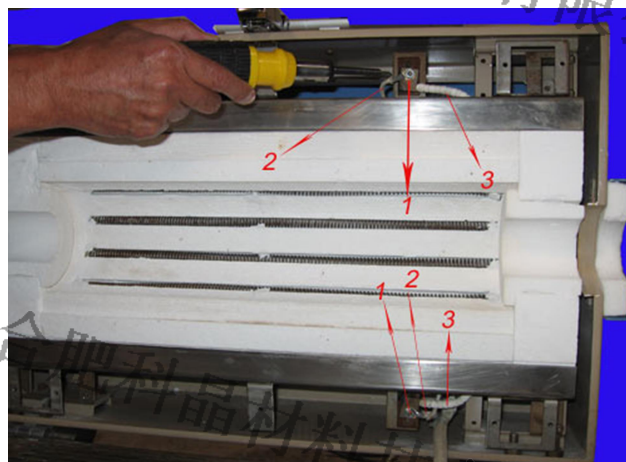

4. 将万用表的指针（这里为旋钮万用表）调到 $\Omega$ 档，然后如图 4，检查连接在两电阻丝之间的电阻加热元件。如果万用表在欧姆档显示为零，这意味着加热元件正常工作，否则请检查加热元件或者更换整个加热元件与耐火材料。

**注意：在测量之前，请确保螺母、电阻丝和螺栓的接触。**

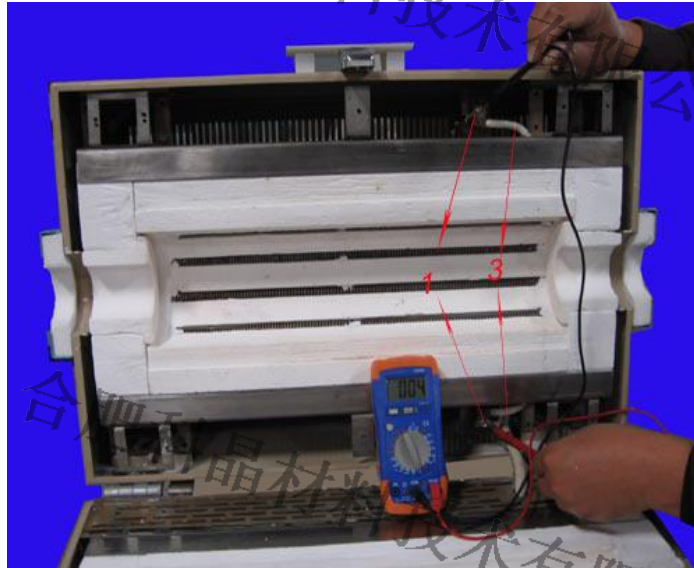

5. 同样，重复步骤 1-4 即可完成底部加热元件的更换

6. 如果您真的需要更换加热元件，请联系我们。。。。

合肥科晶材料技术有限公司